

Transclinic Xi+の ID 番号設定について

Transclinic Xi+の認識 ID 番号は基板上に設置された DIP スイッチ 1 において設定します。ID 番号は 8bit で設定されるため、1~128 の範囲で設定が可能です。

(ご注意!) DIP SW を変更する際は必ず Transclinic の電源を OFF にしてください。電源再投入後に設定した ID が有効となります。

以下のリストは ID_1~ID_20 までを例とした場合の“10 進数の ID 番号”、および“それに対応する 2 進数表示と実際の DIP SW の ON-OFF 状況”を示したものです。

| ID No. (Dec) | ID No. (Bin) | DIP SW1 | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 10進数 | 2進数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 00000000 | | | | | | | | |
| 1 | 00000001 | ■ | | | | | | | |
| 2 | 00000010 | | ■ | | | | | | |
| 3 | 00000011 | ■ | ■ | | | | | | |
| 4 | 00000100 | | | ■ | | | | | |
| 5 | 00000101 | ■ | | ■ | | | | | |
| 6 | 00000110 | | ■ | ■ | | | | | |
| 7 | 00000111 | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 8 | 00001000 | | | | ■ | | | | |
| 9 | 00001001 | ■ | | | ■ | | | | |
| 10 | 00001010 | | ■ | | ■ | | | | |
| 11 | 00001011 | ■ | ■ | | ■ | | | | |
| 12 | 00001100 | | | ■ | ■ | | | | |
| 13 | 00001101 | ■ | | ■ | ■ | | | | |
| 14 | 00001110 | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 15 | 00001111 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 16 | 00010000 | | | | | ■ | | | |
| 17 | 00010001 | ■ | | | | ■ | | | |
| 18 | 00010010 | | ■ | | | ■ | | | |
| 19 | 00010011 | ■ | ■ | | | ■ | | | |
| 20 | 00010100 | | | ■ | | ■ | | | |

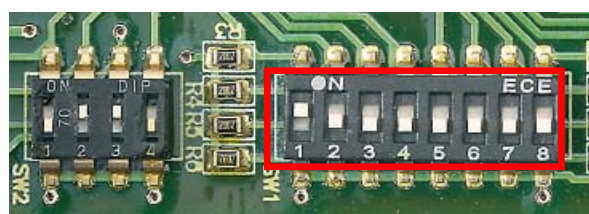


図: Transclinic Xi+ ID 番号設定用 DIP SW_1